

ドゥー ブラシ  
360do BRUSH® CH コンパクト  
ヘッド



女性向けに開発された  
コンパクトヘッド

〔硬さ〕 ふつう  
〔全長〕 174mm  
〔重量〕 10g  
〔ブラシ毛〕 0.08mm  
〔ヘッド径〕 15mm  
〔ハンドル径〕 12mm  
〔材質〕 ナイロン(毛)  
ポリプロピレン(柄)



4 571196 891476

ドゥー ブラシ  
360do BRUSH® Kan



歯に優しいしなやかさ  
で歯間に入りやすい

〔硬さ〕 やわらかめ  
〔全長〕 174mm  
〔重量〕 10g  
〔ブラシ毛〕 0.08mm  
〔ヘッド径〕 16mm  
〔ハンドル径〕 12mm  
〔材質〕 ナイロン(毛)  
ポリプロピレン(柄)



4 571196 891469

ドゥー ブラシ  
360do BRUSH® Soh



歯垢除去力が高く、  
爽快なみがき心地

〔硬さ〕 ふつう  
〔全長〕 174mm  
〔重量〕 10g  
〔ブラシ毛〕 0.08mm  
〔ヘッド径〕 16mm  
〔ハンドル径〕 12mm  
〔材質〕 ナイロン(毛)  
ポリプロピレン(柄)



4 571196 891452

■■ 回転しません ■■

■■ 製法特許（当社独自製法）取得済 ■■

ドゥー ブラシ  
360do BRUSH® BABY

ベビー  
乳児～



国内・海外  
売上No.1

〔硬さ〕 ふつう  
〔全長〕 154mm  
〔重量〕 8g  
〔ブラシ毛〕 0.08mm  
〔ヘッド径〕 13.5mm  
〔ハンドル径〕 11mm  
〔材質〕 ナイロン(毛)  
ポリプロピレン(柄)



4 571196 891506

ドゥー ブラシ  
360do BRUSH® KIDS

キッズ  
3才以上



歯みがきが好きになる  
嫌がない！痛がない！

〔硬さ〕 ふつう  
〔全長〕 154mm  
〔重量〕 8g  
〔ブラシ毛〕 0.08mm  
〔ヘッド径〕 14.5mm  
〔ハンドル径〕 11mm  
〔材質〕 ナイロン(毛)  
ポリプロピレン(柄)



4 571196 891483

ドゥー ブラシ  
360do BRUSH® My Melody

キッズ  
3才以上



大人気キャラクター  
「マイメロディ」

〔硬さ〕 ふつう  
〔全長〕 154mm  
〔重量〕 8g  
〔ブラシ毛〕 0.08mm  
〔ヘッド径〕 14.5mm  
〔ハンドル径〕 11mm  
〔材質〕 ナイロン(毛)  
ポリプロピレン(柄)



4 571196 891995




# みがきかた

回転させずに、ふつうの歯ブラシと同じように、横磨き・縦磨きで磨いて下さい。1本ずつ磨くイメージです。

## 前歯

いつもと同じように、横磨き、縦磨き。歯並びが良くない方には縦磨きをおすすめします。

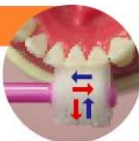

## 前歯の裏側

満身に磨けないところ。それが前歯の裏側です。円筒ヘッドなら、大量の極細毛が汚れている部分にぴったりフィット。



## 犬歯

凹凸が多い犬歯の部分は、縦磨きで磨きます。



## 前歯裏側 - 上下同時磨き

円筒ヘッドなので、上下同時に磨くことも可能です。回さずに横磨きで磨いて下さい。



## 奥歯 - 上下同時磨き

前歯同様に奥歯の同時磨きができます。口を閉じ気味にして内側を、軽く噛むようにしてトップを磨きます。奥は開き気味に、手前は閉じ気味といったように、あごの角度を徐々に変えて行くのがポイントです。



## 歯ぐきフラッシング・舌クリーニング

歯ぐきを軽くブラッシングする。(細胞の新陳代謝や、歯ぐきの血行を良くする効果を期待できます。)




舌はマッサージするイメージで軽〜くブラッシングしましょう。舌のクリーニングは、軽く舌を突き出し、ブラシを舌に乗せ、やさしくブラッシング。やり過ぎると舌を傷つけるので注意しましょう。




# 歯垢(プラーク)除去率98.4%

●第三者機関による試験結果


## ◆人工歯垢(プラーク)除去効果試験の結果

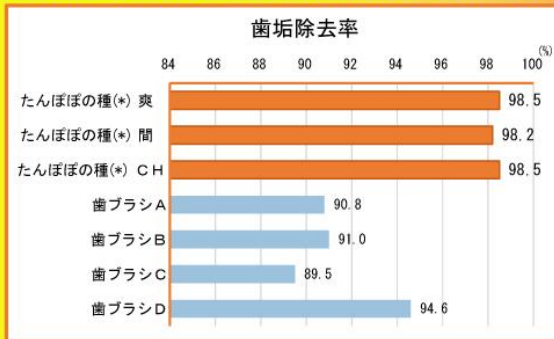

## ◆モニター試験の結果

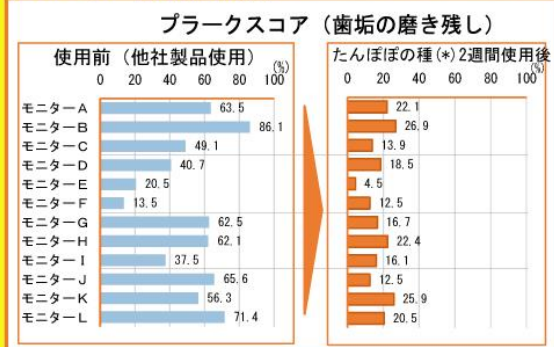

## ◆歯ぐき状態判定

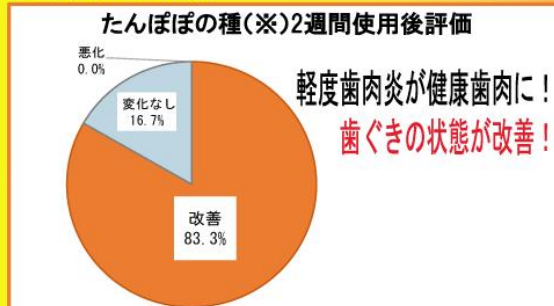

※たんぼぼの種は、360do BRUSHの旧ブランドです。


# 360度毛の実力



ドゥー ブラシ  
360do BRUSH®

360do BRUSH changes the world

まあいい歯ブラシ どちらが好きですか？

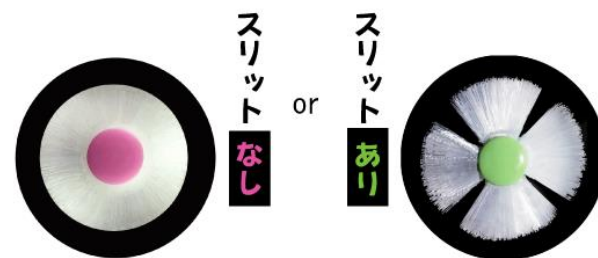

株式会社 STB ヒグチ  
〒578-0935 大阪府東大阪市若江東町 4-6-29  
TEL 06-6730-1712 FAX 06-6730-1713  
URL www.stb-h.co.jp